

## COL

REF	flaconi per kit	vol riempimento per flacone	gocce per flacone
COL10	10	0 - 1,45 ml	45
COL20	20	0 - 1,45 ml	45
COLB10	10	0 - 2,50 ml	80
COLB20	20	0 - 2,50 ml	80

## COL.C

REF	flaconi per kit	vol riempimento per flacone	gocce per flacone
COLC30	30	0 - 1,45 ml	45
COLC40	40	0 - 1,45 ml	45
COLC50	50	0 - 1,45 ml	45
COLCB30	30	0 - 2,50 ml	80
COLCB40	40	0 - 2,50 ml	80
COLCB50	50	0 - 2,50 ml	80



KIT PER LA  
PREPARAZIONE  
DI ALIQUOTE  
DI COLLIRIO  
CON EMOCOMPONENTI  
FRESCHI AUTOLOGHI

COL / COL.C

BIOMED DEVICE S.R.L.  
via Ippolito Nievo, 89  
41124 Modena - Italia

telefono +39.059.343929 - fax +39.059.4550010  
e.mail: info@biomeddevice.it  
www.biomeddevice.it



# COMODO VELOCE SICURO COL / COL.C



flacone  
richiudibile



fino a  
**20**  
flaconi

gocce  
standard  
**0,031**  
ml

**KIT PER LA PREPARAZIONE DI ALIQUOTE DI COLLIRIO  
CON EMOCOMPONENTI FRESCHI AUTOLOGHI.  
SISTEMA PER LA PREPARAZIONE  
E LA CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI.**


COL nasce dall'esperienza e dalla lunga ricerca di Biomed Device per consentire la preparazione di aliquote di collirio con emocomponenti freschi autologhi (siero, plasma ricco di piastrine, concentrato piastrinico, autosiero, siero-collirio). COL è un kit sterile preconnesso e a circuito chiuso che consente la massima praticità di utilizzo. **Ogni dettaglio tecnico è progettato per rispondere in modo semplice, veloce e sicuro alle esigenze degli operatori sanitari.**

da **45**  
a **80**  
gocce

## VUOI PIÙ FLACONI?

Scegli la configurazione COL.C per ottenere fino a 50 flaconi!

fino a  
**50**  
flaconi

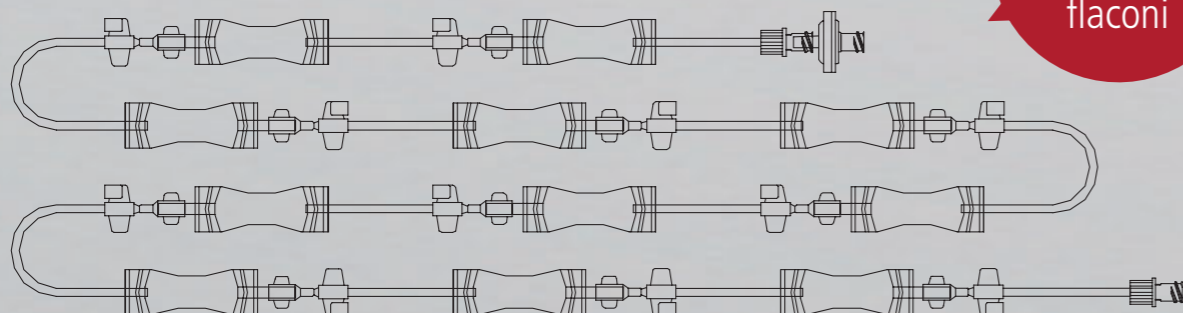

## LE CARATTERISTICHE

- COL: configurazione a rampa, da 10 a 20 flaconi con gocciolatore.
- COL.C: configurazione a collana, fino a 50 flaconi con gocciolatore.
- Gocce standard del volume di 0,031 ml ciascuna.
- Configurazione da 45 o 80 gocce.
- Linea di riempimento con attacco luer lock e rubinetto per trasferimento da sacca. Linea realizzata con diametro e materiali compatibili con i più comuni sistemi di saldatura/connesione sterile presenti sul mercato.
- Kit corredato da un contenitore isotermico con etichetta conforme, a norma UN 3373, atto al trasporto dei flaconi contenenti emocomponenti.
- Materiali: PVC DOP/DEHP FREE - PE - PP - PC - ABS - PTFE. Dispositivo latex free.
- Registrato al Repertorio dei Dispositivi Medici (D.M.) del Ministero della Salute Italiano. Certificazione CE0051.
- Patent pending: tutti i prodotti della linea COL sono protetti da brevetti industriali internazionali.